

Çorap Kimlik Kartı

Kişisel ölçülerinize göre üretilen yeni BELSANA tıbbi kompresyon çorabınız kullanımınıza sunulmuştur. Uzun süreli etkili kompresyon terapisi için altı ay sonra doktorunuzla tekrar iletişime geçmenizi tavsiye ederiz. Tıbbi ihtiyaç durumunda doktorunuz size yeni bir reçete verebilir. Lütfen yeniden sipariş vermek için bu çorap kartını yanınızda getirin. Size önerilerde bulunmaktan memnuniyet duyarız!

Çorap Kimlik Kartı

Size özel ürününüz burada!



Çamaşır makinesi talimatları

Kompresyon çoraplarını doğru şekilde yıkayın

Lütfen ters çevirerek yıkayın ve yumuşatıcı kullanmayın!

Hassas ayarda yıkayın

Ağartıcı kullanmayın

Nazikçe kurutun

Ütülemeyin

Kuru temizleme yapmayın



BELSANA

BELSANA

İleride bize sipariş verirken işlemleri kolaylaştırmak ve basitleştirmek amacıyla sol tarafta size ait **Kişisel Çorap Bilgi Kartını** bulacaksınız. Bu kart size ait tüm temel bilgilerini içermektedir. Yapmanız gereken koparmak, yapıştırmak ve güvenli bir yerde saklamaktır.

Saygılarımızla
BELSANA ekibiniz

Yıkama

- Hemen kullanıma uygundur
- Tavsiye: İlk kullanımdan önce yıkayın
- Her gün (maks. 40°C) elle veya makinenin hassas ayarında yıkayın
- Hassas çamaşır deterjanıyla (örneğin „BELSANA blau40 deterjan“), yumuşatıcı kullanmadan ayrı olarak yıkayın
- İyice durulayın, makinede yavaş hızda sıkın, elle bükerek sıkmayın.
- Bir havlu üzerinde havayla veya kurutucunuzun hassas ayarında kurutun, asla ütülemeyin ve ısıtıcının üzerine koymayın veya güneşte kurutmayın

Malzeme bileşimi

Polyamid (Polyamid), elastan (Elastan) ve bazı ürünlerde pamuk (Baumwolle). Spesifik bilgiler, çorabınıza dikilmiş tekstil etiketinde mevcuttur.

Bakım

- Kuru bir şekilde ve mümkünse orijinal ambalajında, güneşten ve ısıdan koruyarak saklamanızı tavsiye ederiz
- Silikon kaplı yapışkan bantlı çoraplar; çözücüler, merhemler, kremler ve nemlendirici yıkama losyonları ile temas etmemelidir. Aksi takdirde yapışkan bantların yapışma özelliği kalıcı olarak bozulabilir
- Düzenli ayak bakımı yapmaya ve uygun ayakkabılar giymeye dikkat edin
- Lif topakları (pilling) tekstilde normal bir süreçtir ve şikayet nedeni olabilecek bir durum değildir
- Çoraplardaki hasarları kendi başınıza onarmayın, çorabı satın aldığınız tıbbi ürün satıcısına geri götürün

Kullanım amacı

Kompresyon çorapları, kol ve bacaklardaki flebolojik ve lenfolojik hastalıkların yanı sıra lipödem tedavisinde de kullanılmaktadır. Endikasyona bağlı olarak farklı ürünler tercih edilir.

⚠️ Önemli bilgiler

- Kompresyon çoraplarını sadece doktorunuza danıştıktan sonra kullanın
- Her gün giyme ve düzenli kontrol muayeneleri, tedavinin başarılı olmasını sağlar
- Çoraplar tıbbi eğitim almış uzmanlar tarafından teslim edilmeli ve çorapları nasıl doğru şekilde giyeceğiniz konusunda size tavsiyede bulunmalıdırlar
- Akut bacak ağrısı veya cilt tahrişi yaşarsanız lütfen derhal doktorunuza danışın
- Yapışkan bandın düzenli olarak hafifçe hareket ettirilmesi cildin tahriş olmasını önleyebilir
- Kalite sorunları ve şikayetler için lütfen tıbbi ürün satıcısıyla iletişime geçin

Tıbbi kompresyon çoraplarının etkisi

İlgili endikasyona göre uyarlanmış ürünlerle ve kontrollü basınçla kan akışı hızlandırılır, dokudaki mikro sirkülasyon iyileştirilir ve lenf akışı artırılır.

Rev. 1/04/21

BELSANA
Zweigniederlassung der Ora Bamberg GmbH
Laubanger 23 · D-96052 Bamberg · www.belsana.de
Wasserfeldstr. 20 · A-5020 Salzburg

Ora Bamberg GmbH
Laubanger 20
D-96052 Bamberg

Uzman bayi için: arşivinizdeki çorap bilgileri



Ayaklarınızın üzerinde sağlıklı kalabilmeniz için hep beraber sağlıyoruz!

Örneğin özel üretilmiş BELSANA çorabınız, tıbbi kompresyon çorapları (RAL-GZ 387/1) için dünya çapındaki en sıkı kalite ve test düzenlemelerine uygundur ve güvenli malzeme ve boyaların kullanılmasını şart koşan Öko-Tex Standardı 100'ü karşılar.

Size özel BELSANA Bamberg ürününü üretilirken, yılların araştırma ve geliştirilmesinin sonucu olan bir ürünü kullanmaktasınız. Özenli üretim ve yüksek kalite, en gelişmiş teknolojiler kullanılarak denetlenir ve elde edilir. Sorumlu ve bilinçli üretim yöntemlerimiz, bağımız test kuruluşlarının verdiği sertifikalarla belgelendirilmiştir.

BELSANA'dan

En üstün kalite

Endikasyonlar

(İstisna tamamlanır 1/28 tarihli AWMF 037/005)

Mutlak kontrendikasyonlar

- İleri periferik arter hastalığı
- Dekompanse kalp yetersizliği
- Sepkik flebit
- Plegmasta coerulea dolens

Bağıl kontrendikasyonlar

- Eksüdatif dermatozlar
- Kompresyon çorabı malzemesine karşı intolerans
- Ekstremitelerde şiddetli duyu bozuklukları
- İleri periferik nöropati (örneğin diabetes mellitus)
- Kronik poliartrit

Bu kontrendikasyonların dikkate alınmaması durumunda hiçbir sorumluluk kabul edilmemez.

Bertaraf etme


Kullanım ömrünün sonunda lütfen ürünü biyogenizdeki yöntemlere uygun olarak bertaraf edin.

Besal düzenlemeler nedeniyle, hastalar ve kullanıcılar, sağlık üzerinde olumsuz bir sonuç veya ölüm yol açan ya da yol açabilecek, tıbbi ve/veya ağırlıklı ciddi olayları üreticiye ve sorumlu üreticiye bildirmelidir.


Asya'daki belirtilen görülmüş durumlarında lütfen çorapları hemen çıkarmak ve tedaviye devam edip edilmeyeceği konusunda doktora danışın: Ayak parmaklarında mavi veya beyaz renklenme, anormale hisler ve uyuşukluk, artan ağrı, nefes darlığı ve tetleme, akut kısıtlı hareketlilik.

Pratik talimatlarımızı izleyerek çoraplarınızı giymek çok kolaydır.


Açık burunlu çoraplar

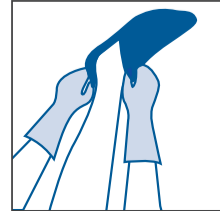


1. Açık burunlu çorapları rayon malzemesinden üretilmiş BELSANA giyim yardımcısı kullanarak giymek çok daha kolaydır. Ayacağınızı giyim yardımcısına, topuğunuzun biraz üzerine gelinceye kadar sokun.

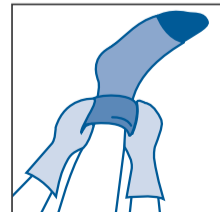


2. Şimdi topuğunuz doğru şekilde yerine oturana kadar çorabı giyin. Bunun BELSANA giyim yardımcısı ile kolay olduğunu göreceksiniz.

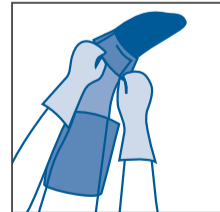

3. Giyim yardımcısını çıkartmak için ayak kısmının önünü şekilde gösterildiği gibi geriye kıvrın.

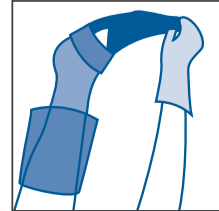

4. Sonra giyim yardımcısını ayak parmaklarınızdan öne doğru çekerek çıkartın.

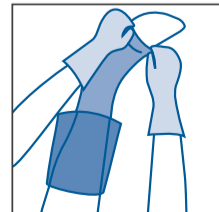

5. Ardından kıvrılmış olan ayak kısmını tekrar öne doğru ve çorabı yukarıya doğru, esnetmeden düzenli şekilde yukarı doğru çekin. Çorak kırışksız şekilde oturuncaya kadar elinizle düzeltin.