

Certificat pentru ciorapi

Tocmai ați primit noii ciorapi medicinali de compresie de la BELSANA – confecționați conform măsurătorilor dvs. individuale. Pentru ca terapia de compresie să fie eficientă pe termen lung, vă recomandăm să consultați din nou medicul după șase luni. Dacă este necesar din punct de vedere medical, acesta vă poate elibera o nouă rețetă. Vă rugăm să prezentați acest certificat pentru ciorapi la următoarea comandă.

Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi!



Etichetă cu instrucțiuni pentru spălarea la mașină

Spălați corect ciorapii de compresie

Vă rugăm să spălați ciorapii pe dos și să nu utilizați balsam de rufe!

Ciclu de spălare pentru rufe delicate

Nu utilizați înălbitori

Uscați cu grijă

Nu călcați

Nu curățați chimic



BELSANA

Certificat pentru ciorapi

Produsul dvs. personalizat este aici!

Pentru a face simplă și ușoară comanda ulterioară a următoarei rețete, veți găsi în partea stângă **certificatul personal pentru ciorapi** cu toate informațiile relevante. Pur și simplu dezlipiți-l, pliați-l și păstrați-l în siguranță.

Cu cele mai bune recomandări
Echipa dvs. BELSANA

BELSANA



Spălarea

- adecvați pentru folosirea imediată
- recomandare: spălați ciorapii înainte de prima purtare
- spălare zilnică (max. 40°C), la mână sau la programul delicat de spălare al mașinii
- separat cu detergent delicat (de ex., detergent BELSANA blau40*), nu folosiți balsam de rufe
- clătiți riguros, centrifugați delicat, dar nu stoarceți
- uscați la aer pe un prosop sau la programul delicat al uscătorului, nu călcați niciodată și nu uscați pe calorifer sau la soare

Compoziția materialului

Poliamidă (Polyamid), elastan (Elastan) și, în cazul anumitor produse, bumbac (Baumwolle). Pe eticheta textilă cusută pe ciorapii dvs. se află toate datele concrete.

Întreținerea

- a se păstra la loc uscat, ideal în ambalajul original, protejați de lumina directă a soarelui și de căldură
- Evitați contactul ciorapiilor cu benzi adezive acoperite cu silicon cu solvenți, unguente, creme și loțiuni hidratante de spălare, deoarece aderența poate fi afectată permanent
- acordați atenție îngrijirii regulate a picioarelor și încălțămîntei corespunzătoare
- scămășoarea reprezintă un proces normal în cazul textilelor și nu reprezintă un motiv de reclamație
- nu reparați niciodată singuri daunele produse ciorapiilor, ci aduceți-i înapoi la distribuitorul de la care au fost cumpărați ciorapii

Scopul propus

Ciorapii compresivi sunt utilizați în tratamentul afecțiunilor flebologice și limfologice ale brațelor și picioarelor, precum și în cazul lipedemelor. În funcție de indicațiile medicului, se vor folosi produse diferite.

⚠ Indicații importante

- purtați ciorapii de compresie numai după consultarea unui medic
- purtarea zilnică și controalele regulate asigură succesul tratamentului
- personalul instruit din punct de vedere medical trebuie să ofere indicații și recomandări cu privire la modul corect de purtare
- în caz de dureri acute ale piciorului sau reacții cutanate, vă rugăm să consultați imediat medicul
- deplasarea ușoară regulată a benzii adezive poate preveni iritarea pielii
- dacă întâmpinați probleme legate de calitate sau aveți reclamații, vă rugăm să contactați distribuitorul specializat

Efectele ciorapiilor compresivi medicinali

În urma utilizării produselor conform indicațiilor și datorită presiunii controlate exercitate, întoarcerea sângelui este accelerată, microcirculația din țesuturi este îmbunătățită, iar fluxul limfatic este sporit.

Rev. 1/04/21

Pentru farmacie: Datele ciorapiilor pentru arhivare



BELSANA Medizinische Erzeugnisse
Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 23 · D-96052 Bamberg · www.belsana.de
Wasserfeldstr. 20 · A-5020 Salzburg

Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 20
D-96052 Bamberg

BELSANA

Împună ne vom asigura că rămâneți pe picioare în formă!

materiale și coloranți înofensivi.

Öko-Tex 100, care stipulează utilizarea de (RAL-GZ 387/1) și îndeplinește standardul pentru ciorapii medicinali de compresie

reglementări de calitate și testări din lume corespunde, de exemplu, cu cele mai stricte

Produsul dvs. BELSANA realizat la comandă

gestionarea responsabilă a produselor noastre.

testare independente documentează

Certificările periodice de către institutele de prin utilizarea celei mai moderne tehnologii.

ridicat de calitate sunt asigurate și controlate și dezvoltate. Prelucrarea atentă și nivelul

comandă purtați rezultatul anilor de cercetare

Cu produsul dvs. BELSANA realizat la

de la firma BELSANA


Calitate de top

Indicații


(a se vedea și Directiva Medicală privind Tratatamentul Compresiv AWMF 037/005, versiunea 12/18)

- Ameliorarea simptomelor venoase și a calității vieții în cazul bolilor venoase cronice
- Prevenția și tratamentul edemelor venoase
- Prevenția și tratamentul modificărilor de origine venoasă și pigmentară
- Eceme și pigmentări
- Sindrromul posttromboză și atrofia albă
- Tratamentul și ameliorarea durerilor în cazul Ulcusus cruris venosum și proflaxia recidivelor
- Tratamentul Ulcusus cruris arterial și venos (a se vedea și contraindicațiile)
- Varioză
- Faza inițială de după tratamentul varicozelor
- Insuficiență venoasă funcțională
- Malformații venoase
- Tromboză venoasă
- Starea de după tromboză
- Sindrrom posttrombotic
- Profilaxia trombozei în cazul pacienților mobili
- Limfedeme
- Edeeme în sarcină
- Edeeme posttraumatice/postoperatorii
- Edeeme ciclice idiopatice
- Lipedeme începând cu stadiul II
- Congestii în urma imobilizării (sindrrom de congestie artrogen, pareze și pareze parțiale ale extremității)
- Edeeme apărute în urma expunerii profesionale (profesii care presupun stadiu în picioare sau șezut pe durate mari de timp)


Purtarea lor este ușoară - cu instrucțiunile practice!

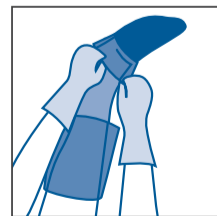


1. Pentru îmbrăcarea ciorapii compresivi cu vârf deschis este deosebit de util dispozitivul de ajutor BELSANA livrat împreună cu ciorapii. Introduceți laba piciorului în materialul ajutător până când acesta se află puțin deasupra călcăiului.

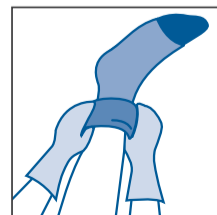


2. Acum îmbrăcați ciorapii astfel încât călcăiul să ajungă în locul potrivit. Dispozitivul BELSANA usurează foarte mult îmbrăcarea ciorapiului.

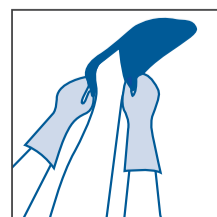

3. Pentru a scoate materialul ajutător, ciorapiului care vine pe laba răsucit puțin partea din față a ciorapiului.

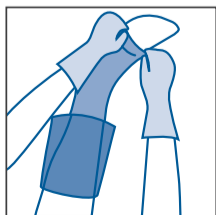

4. Apoi trageți în față dispozitivul, peste degetele de la picior.

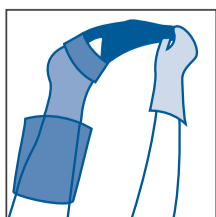

5. La final, rulați în loc partea din față a ciorapiului care vine peste laba piciorului. Apoi trageți restul lungimea piciorului, fără a-l întinde, astfel încât să nu mai rămână cute.

Contraindicații absolute

- Edeeme cauzate de medicamente, atunci când acestea nu pot fi schimbate
- Obstrucție cu insuficiență venoasă funcțională
- Dermatoze inflamatorii ale picioarelor
- Greață, amețeli și senzație de congestie în sarcină
- Stare după arsuri
- Tratamentul cicatricilor

Contraindicații relative

Riscuri și efecte adverse

- Poliarrită cronică (de ex. diabet zaharat)
- Tulburări senzoriale grave ale extremității
- Neuropatie periferică în stadiu avansat
- Boala arterială periferică oculară în stadiu avansat
- Dermatoze umede
- Alergie la materialele din care sunt fabricați ciorapii compresivi
- Insuficiență cardiacă decompensată
- Fiebră septică
- Flegmasia coerulea dolens

În cazul nerespectării contraindicațiilor nu ne asumăm nicio răspundere.

Obligația de notificare

Conform prevederilor legale, pacienții și utilizatorii au obligația să notifice imediat producătorii și autoritatea competentă la nivel național (în Germania, BfArM) în legătură cu incidentele grave aparute în legătură cu ciorapii, care au dus sau ar fi putut duce la o înrăutățire dramatică a stării de sănătate sau chiar la deces.

Eliminarea

Vă rugăm ca la finalul duratei de utilizare să eliminați produsul în conformitate cu reglementările locale.

Garantie

Ciorapii compresivi medicinali pot fi depozitați în condiții corecte timp de 3 ani, totodată, trebuie ținut cont și de durata de purtare de cel mult 6 luni, în condițiile unei utilizări regulate și a unei îngrijiri corespunzătoare. După expirarea acestui termen, produsele nu mai sunt acoperite de garanție. De la garanție mai sunt excluși, din principiu, și defectele aparute în urma uzurii obișnuite sau a unei utilizări de către un singur pacient. În cazul în care este transmis spre utilizare altor persoane, producătorul nu mai are obligația de acordare a garanției.

piciorare, senzații ciudate sau de amortăală, excesive, limitări acute ale mișcărilor.