

Ihre Maßanfertigung ist da!

Damit Ihre Nachbestellung bei der nächsten Verordnung ganz einfach und unkompliziert ist, finden Sie links **Ihren persönlichen Strumpfpass** mit allen maßgeblichen Informationen. Einfach abziehen, zusammenkleben und gut aufbewahren.

Mit besten Empfehlungen
Ihr BELSANA Team

BELSANA

Strumpfpass

Strumpfpass

Kompressionsstrümpfe richtig waschen

BELSANA Impuls bitte auf rechts bzw. BELSANA Classic extra auf links waschen und keinen Weichspüler verwenden!

Schonwaschung

Nicht bleichen

Schonend trocknen

Nicht bügeln

Nicht chemisch reinigen

Merktel für ihre Waschmaschine



BELSANA



Wichtige Hinweise

- Kompressionsstrümpfe nur nach Rücksprache mit dem Arzt tragen
- tägliches Tragen und regelmäßige Kontrolluntersuchungen sichern den Behandlungserfolg
- Strümpfe mit silikonbeschichteten Haftbändern schützen
- trocknen, am besten in Originalverpackung lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze
- nicht mit Lösungsmitteln, Säuren, Cremes und rückertenden Waschlösungen in Berührung bringen, da die Haftfähigkeit dauerhaft beeinträchtigt werden kann
- unbedingt auf regelmäßige Fußpflege und einwandriges Schuhwerk achten
- Faserklochen (Pilling) sind ein normaler Vorgang bei Textilien und kein Reklamationsgrund
- Schäden an Strümpfen niemals selbst reparieren, sondern zurück zu dem Fachhändler bringen, bei dem der Strumpf gekauft wurde

Zweckbestimmung

Kompressionsstrümpfe werden zur Therapie von phlebologischen und lymphologischen Erkrankungen der Arme und Beine sowie bei Lipödem eingesetzt. Je nach Indikation kommen unterschiedliche Produkte zum Einsatz.

Materialzusammensetzung

Verwendet werden Polyamid, Elasthan und bei einigen Produkten Baumwolle oder Merinowolle. Die konkreten Angaben entnehmen Sie bitte dem in Ihrem Strumpf eingeklebten Textilettik.

Waschen

- für den sofortigen Gebrauch geeignet
- Empfindung: vor dem ersten Tragen waschen
- tägliche Wäsche (max. 40°C) von Hand oder im Schonwaschung der Maschine
- separat mit Feinwaschmittel (z. B. BELSANA blau40 Waschmittel), BELSANA Impuls bitte auf rechts bzw. BELSANA Classic extra auf links waschen und keinen Weichspüler verwenden!
- gut ausspülen, schonend schließern aber nicht wringen
- auf einem Handtuch an der Luft oder im Schongang ihres Trockners trocknen, niemals bügeln und nicht auf der Heizung oder in der Sonne trocknen

Pflegen

- trocknen, am besten in Originalverpackung lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze
- nicht mit Lösungsmitteln, Säuren, Cremes und rückertenden Waschlösungen in Berührung bringen, da die Haftfähigkeit dauerhaft beeinträchtigt werden kann
- Strümpfe mit silikonbeschichteten Haftbändern schützen
- tägliche Wäsche (max. 40°C) von Hand oder im Schonwaschung der Maschine
- separat mit Feinwaschmittel (z. B. BELSANA blau40 Waschmittel), BELSANA Impuls bitte auf rechts bzw. BELSANA Classic extra auf links waschen und keinen Weichspüler verwenden!
- gut ausspülen, schonend schließern aber nicht wringen
- auf einem Handtuch an der Luft oder im Schongang ihres Trockners trocknen, niemals bügeln und nicht auf der Heizung oder in der Sonne trocknen

Wirprinzip medizinischer Kompressionsstrümpfe

Durch auf die jeweilige Indikation abgestimmte Produkte und kontrollierten Druck werden der Blutrückfluss beschleunigt, die Mikrozirkulation im Gewebe verbessert und der Lymphfluss gesteigert.



für die Apotheke: Strumpfdaten für Ihre Archivierung

BELSANA

BELSANA Medizinische Erzeugnisse
Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 23 · D-96052 Bamberg · www.belsana.de
Wasserfeldstr. 20 · A-5020 Salzburg

Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 20
D-96052 Bamberg

Rev. 1/04/21

Spitzenqualität

aus dem Hause BELSANA

Mit Ihrer BELSANA-Maßanfertigung tragen Sie das Ergebnis langjähriger Forschung und Entwicklung. Die sorgfältige Verarbeitung und das hohe Qualitätsniveau werden durch den Einsatz modernster Technik gesichert und kontrolliert. Regelmäßige Zertifizierungen unabhängiger Prüfinstitute dokumentieren unseren verantwortungsvollen Umgang mit unseren Produkten.

Ihre BELSANA-Maßanfertigung entspricht beispielsweise den weltweit strengsten Güte- und Prüfungsbestimmungen für medizinische Kompressionsstrümpfe (RAL-GZ 387/1) und erfüllt den Öko-Text Standard 100, der die Verwendung von unbedenklichen Materialien und Farbstoffen vorschreibt.

Gemeinsam sorgen wir dafür, dass Sie fit auf den Beinen bleiben!

Indikationen

(die komplette Liste finden Sie in der Leitlinie AWMF 037/005, Stand 12/18)

- Verbesserung venöser Symptome und der Lebensqualität bei chronischen Venenkrankheiten
- Prävention und Therapie venöser Ödeme
- Prävention und Therapie venöser Hautveränderungen
- Dermatoiposklerose und Atrophie blanche
- Therapie des arteriell und venös bedingten Ulcus cruris (siehe Kontraindikationen!)
- Varikose
- Initiale Phase nach Varikosetherapie
- Funktionelle venöse Insuffizienz
- Venöse Malformationen
- Venenthrombose
- Zustand nach Thrombose
- Postthrombotisches Syndrom
- Thromboseprophylaxe bei mobilen Patienten
- Lymphödeme
- Ödeme in der Schwangerschaft
- Lipödeme ab Stadium II
- Stauungszustände infolge von Immobilitäten (arthrogenes Stauungssyndrom, Paresen und Teilparesen der Extremität)
- Adipositas mit funktioneller venöser Insuffizienz
- Entzündliche Dermatosen der Beine
- Übelkeit, Schwindel und Stauungsbeschwerden in der Schwangerschaft
- Zustand nach Verbrennungen
- Narbenbehandlung

Absolute Kontraindikationen

- fortgeschrittene periphere arterielle Verschlusskrankheit
- dekompensierte Herzinsuffizienz
- septische Phlebitis
- Phlegmasia coerulea dolens

Relative Kontraindikationen

- ausgeprägte nässende Dermatosen
- Unverträglichkeit auf Kompressionsstrumpfmateriale
- schwere Sensibilitätsstörungen der Extremität
- fortgeschrittene periphere Neuropathie (z. B. Diabetes mellitus)

Bei Nichtbefolgung der Kontraindikationen wird jede Haftung abgelehnt.

Risiken und Nebenwirkungen

Bei empfindlicher Haut kann es unter den Kompressionsstrümpfen zu Juckreiz und Hautproblemen kommen. Daher wird eine adäquate Hautpflege empfohlen.

Bei folgenden Symptomen, die Strümpfe bitte umgehend ausziehen und die Fortführung der Therapie mit dem Arzt besprechen: Blau- oder Weißfärbung der Zehen, Missempfindungen und Taubheitsgefühle, zunehmende Schmerzen, Kurzatmigkeit und Schweißausbrüche, akute Bewegungseinschränkungen.

Gewährleistung

Die Lagerfähigkeit von medizinischen Kompressionsstrümpfen ist bei sachgemäßer Lagerung auf 3 Jahre begrenzt. Hinzu kommt die Tragezeit, die bei regelmäßigem Gebrauch und ordnungsgemäßer Pflege maximal 6 Monate beträgt. Nach Ablauf dieser Frist sind die Produkte von der Gewährleistung ausgeschlossen. Grundsätzlich von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Mängel, welche auf üblichen Verschleiß bzw. unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind. Unter unsachgemäßen Gebrauch fällt auch die nachträgliche Veränderung des Produktes, welche nicht von der Herstellerfirma durchgeführt worden ist. Das Produkt ist zur Versorgung eines einzigen Patienten vorgesehen. Wird es zum Wiedereinsatz an andere Personen weitergegeben, erlischt die Produkthaftung des Herstellers.


Entsorgung

Nach Ende der Nutzungsdauer entsorgen Sie das Produkt bitte gemäß den örtlichen Bestimmungen.

Meldepflicht

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften sind Patienten und Anwender verpflichtet, im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretene schwerwiegende Vorfälle, die zu einer wesentlichen Verschlechterung des Gesundheitszustandes oder zum Tod geführt haben oder hätten führen können, dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde (in Deutschland BfArM) unverzüglich zu melden.

Patientenname
Auftragsdatum
Auftragsnummer
Produktionsnummer
Hilfsmittelnummer

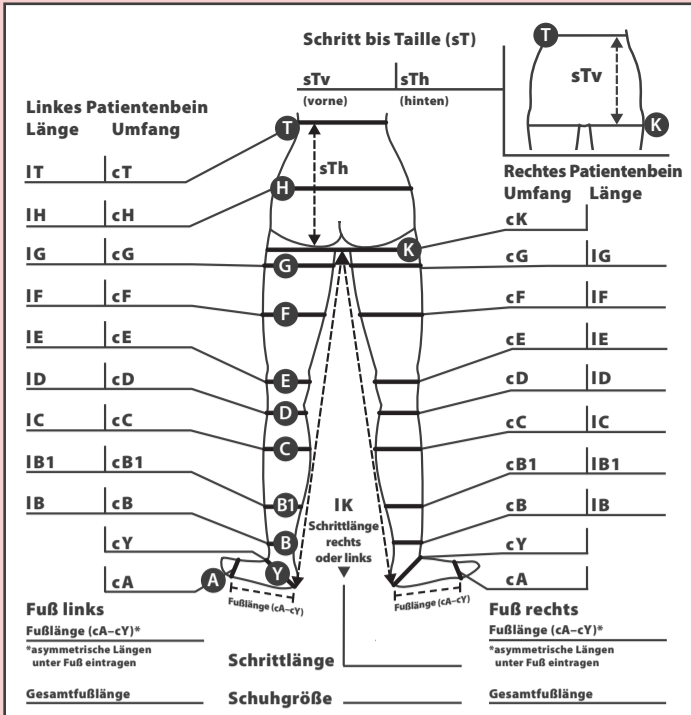

für die Apotheke: Maßschema kann ggf. bei der Krankenkasse zur Abrechnung eingereicht werden