






1. Pentru îmbrăcarea ciorapilor compresivi cu vârf deschis este deosebit de util dispozitivul de ajutor BELSANA livrat împreună cu ciorapii. Introduceți laba piciorului în materialul ajutător până când acesta se află puțin deasupra călcâiului.

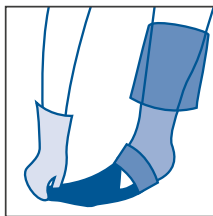

2. Acum îmbrăcați ciorapul astfel încât călcâiul să ajungă în locul potrivit. Dispozitivul BELSANA ușurează foarte mult îmbrăcarea ciorapului.

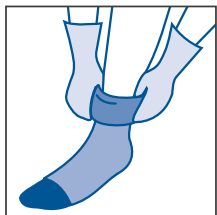

3. Pentru a scoate materialul ajutător, răsuciti puțin partea din față a ciorapului care vine pe laba piciorului.

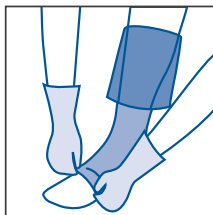

4. Apoi trageți în față dispozitivul, peste degetele de la picioare.

5. La final, rulați la loc partea din față a ciorapului care vine peste laba piciorului. Apoi trageți restul ciorapului uniform în sus pe lungimea piciorului, fără a-l întinde. La final distribuiți țesătura uniform, astfel încât să nu mai rămână cute.

Purtarea lor este ușoară – cu instrucțiunile practice.

## Calitate de top

DE LA FIRMA BELSANA

Cu produsul dvs. BELSANA realizat la comandă purtați rezultatul anilor de cercetare și dezvoltare. Prelucrarea atentă și nivelul ridicat de calitate sunt asigurate și controlate prin utilizarea celei mai moderne tehnologii. Certificările periodice de către institutele de testare independente documentează gestionarea responsabilă a produselor noastre.

Produsul dvs. BELSANA realizat la comandă corespunde, de exemplu, cu cele mai stricte reglementări de calitate și testări din lume pentru ciorapii medicali de compresie (RAL-GZ 387/1) și îndeplinește standardul OEKO-TEX® 100, care stipulează utilizarea de materiale și coloranți inofensivi.

**Împreună ne vom asigura că rămâneți pe picioare în formă!**

### Indicații (a se vedea și Directiva Medicală privind Tratatamentul Compresiv AWMF 037/005, versiunea 12/18)

- Ameliorarea simptomelor venoase și a calității vieții în cazul bolilor venoase cronice
- Prevenția și tratamentul edemelor venoase
- Prevenția și tratamentul modificărilor de origine venoasă a tegumentelor
- Eczeme și pigmentări
- Dermatoliposcleroză și atrofie albă
- Tratatamentul și ameliorarea durerilor în cazul Ulcus cruris venosum și profilaxia recidivelor
- Tratatamentul Ulcus cruris arterial și venos (a se vedea și contraindicațiile)
- Varicoză
- Faza inițială de după tratamentul varicozei
- Insuficiență venoasă funcțională
- Malformații venoase
- Tromboză venoasă
- Starea de după tromboză
- Sindrom posttrombotic
- Profilaxia trombozei în cazul pacienților mobili
- Limfedeme
- Edeme în sarcină
- Edeme posttraumatice/postoperatorii
- Edeme ciclice idiopatice
- Lipedeme începând cu stadiul II
- Congestii în urma imobilizării (sindrom de congestie artrogen, pareze și pareze parțiale ale extremității)
- Edeme apărute în urma expunerii profesionale (profesii care presupun statul în picioare sau șezutul pe durate mari de timp)
- Edeme cauzate de medicamente, atunci când acestea nu pot fi schimbate
- Obezitate cu insuficiență venoasă funcțională
- Dermatose inflamatorii ale picioarelor
- Stare după arsuri

- Greață, amețeli și senzație de congestie în sarcină
- Tratatamentul cicatricilor

### Contraindicații: Contraindicații absolute:

- Boală arterială periferică ocluzivă în stadiu avansat (în cazul în care se aplică unul dintre acești parametri: indicele gleznă-brăț (IGB) < 0,5, tensiunea arterială la nivelul gleznei < 60 mmHg, tensiunea arterială la nivelul degetelor de la picioare < 30 mmHg sau presiunea transcutanată a oxigenului (TcPO2) < 20 mmHg la nivelul căputei)
- Insuficiență cardiacă decompensată
- Flebită septică
- Phlegmasia coerulea dolens

### Riscuri care trebuie luate în considerare (decizia terapeutică având în vedere raportul beneficii/riscuri):

- Dermatose umede
- Alergie la materialele din care sunt fabricați ciorapii compresivi
- Alergie la ingredientelor din care sunt fabricați ciorapii compresivi
- Tulburări senzoriale grave ale extremității
- Neuropatie periferică în stadiu avansat (de ex. diabet zaharat)
- Poliartrită cronică

### În cazul nerespectării contraindicațiilor nu ne asumăm nicio răspundere.

#### ⚠ Riscuri și efecte adverse

Ciorapii compresivi medicali pot cauza necroze ale pielii și leziuni ale nervilor periferici induse de presiune. În cazul pielii sensibile, ciorapii compresivi pot provoca mâncărimi și alte probleme ale pielii. Prin urmare, se recomandă o igienă adecvată a tegumen-

telor. Vă rugăm să îndepărtați imediat ciorapii și să discutați continuarea tratamentului cu medicul dvs. în cazul în care apar următoarele simptome: învinețirea sau albirea degetelor de la picioare, senzații ciudate sau de amorțeală, dureri progresive, dispnee și transpirație excesivă, limitări acute ale mișcărilor.

### Garanție

Ciorapii compresivi medicali pot fi depozitați în condiții corecte timp de 3 ani. Totodată, trebuie ținut cont și de durata de purtare de cel mult 6 luni, în condițiile unei utilizări regulate și a unei îngrijiri corespunzătoare. După expirarea acestui termen, produsele nu mai sunt acoperite de garanție. De la garanție mai sunt excluse, din principiu, și defectele apărute în urma uzurii obișnuite sau a unei utilizări neconforme. Utilizare neconformă înseamnă și modificarea, după achiziționare, a produsului, care nu a fost realizată de către firma producătoare. Micile deviații de culoare, care pot apărea ca urmare a procesului individual de vopsire, nu sunt considerate defecte. Prin urmare, mărfurile corespunzătoare sunt excluse de la schimburi și returnări. Produsul este destinat utilizării de către un singur pacient. În cazul în care este transmis spre utilizare altor persoane, producătorul nu mai are obligația de acordare a garanției.

### Eliminarea

Vă rugăm ca la finalul duratei de utilizare să eliminați produsul în conformitate cu reglementările locale.

### Obligația de notificare

Conform prevederilor legale, pacienții și utilizatorii au obligația să notifice imediat producătorul și autoritatea competentă la nivel național (în Germania, BfArM) în legătură cu incidentele grave apărute în legătură cu produsul, care au dus sau ar fi putut duce la o înrăutățire dramatică a stării de sănătate sau chiar la deces.

## BELSANA

**BELSANA Medizinische Erzeugnisse**  
Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH  
Laubanger 23 · D-96052 Bamberg  
www.belsana.de · service@belsana.de

**Vertrieb Österreich: Ofa Austria**  
Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH  
Wasserfeldstraße 20 · A-5020 Salzburg

Ofa Bamberg GmbH  
Laubanger 20  
D-96052 Bamberg



Rev. 1/08/24



Pentru farmacie: Datele ciorapilor pentru arhivare.



**Pierciele decorative:** Eventualele deteriorări ale articolelor de îmbrăcăminte exterioară sau ale suprafețelor sensibile cauzate de pierciele decorative sunt excluse din garanție.

**Efectele ciorapilor compresivi medicali:** În urma utilizării produselor conform indicațiilor și datorită presiunii controlate exercitate, întoarcerea sângelui este accelerată, microcirculația din țesuturi este îmbunătățită, iar fluxul limfatic este sporit.

**Scopul produs**

Ciorapii compresivi sunt utilizați în tratamentul afecțiunilor flebotogice și limfologice ale brațelor și picioarelor, precum și de indicațiile medicului, se vor folosi produse diferite.

### Compoziția materialului

Se utilizează poliamidă (Polyamid), elastan (Elastan) și merinos (Merinowolle). Pe eticheta textilă cusută pe ciorapii dvs. se află toate datele concrete.

- a se păstra la loc uscat, ideal în ambalajul original,
- Evitați contactul ciorapilor cu benzii adezive acoperite cu silicon cu solventi, unguente, creme și loțiuni hidratante de spălare, deoarece aderenta poate fi afectată permanent
- acordată atenție îngrijirii regulate a picioarelor și încălțăminte corespunzătoare
- scămoșarea reprezintă un proces normal în cazul textilelor și nu reprezintă un motiv de reclamație
- dacă întâmpinați probleme legate de calitate sau aveți reclamații, vă rugăm să contactați distribuitorul specializat
- purtați ciorapii de compresie numai după consultarea unui medic
- purtarea zilnică și controlabile regulate asigură succesul tratamentului
- personalului instruit din punct de vedere medical trebuie să ofere indicații și recomandări cu privire la modul corect de purtare
- în caz de dureri acute ale piciorului sau reacții deplasarea ușoară regulată a benzii adezive poate preveni iritarea pielii
- depășirea ușoară regulată a benzii adezive poate depăși înțelesul și nu reprezintă un motiv de reclamație

### Indicații importante

## BELSANA

- ☒ Nu curățați chimic
- ☒ Nu călcați
- ☒ Uscați cu grijă
- ☒ Nu utilizați înălbitori
- ☒ Ciclu de spălare pentru rufe delicate

### Spălați BELSANA impus pe partea dreaptă, respectiv spălați BELSANA classic extra pe partea stângă și nu folosiți balsam de rufe!

## Ciorapii de compresie Spălați corect

Certificatul personal pentru ciorapi. Pur și simplu dezlipiți-l, pliați-l și păstrați-l în siguranță.

Sunteam bucuroși să vă oferim staturii pentru ciorapi la următoarea comandă. Acesta vă poate elibera o nouă rețetă. necesar din punct de vedere medical, nou medical după șase luni. Dacă este lung, vă recomandăm să consultați din compresie să fie eficientă pe termen individuală. Pentru ca terapia de ționată conform măsurătorilor dvs. Tocmai ați primit noii ciorapi medicali

made-to-measure

MADE FOR YOU

BELSANA

Certificat pentru ciorapi

handed over by

