


BELSANA


VEJLEDNING TIL AT TAGE STRØMPEN PÅ, ÅBEN SPIDS



1. Påføringen af dine kompressionsstrømper med åben spids kan lattes væsentligt med den medfølgende BELSANA strømpepåtager. Sæt foden ind i strømpepåtageren, så denne når op til lidt over hælen.

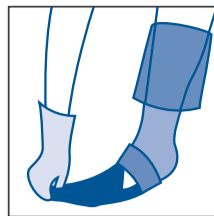

2. Nu trækker du strømpen, så hælen sidder på det rigtige sted. Med BELSANA strømpepåtageren er dette ganske let.

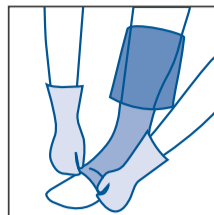

3. For at tage strømpepåtageren af krænger du forfodsdelene af strømpen tilbage.

4. Så trækker du strømpepåtageren frem og ud over tåspidserne.

5. Efterfølgende bliver forfodsdelene på strømpen atter rullet korrekt frem. Stryk derefter resten af strømpen opad i en jævn bevægelse, uden at strække den. Til slut fordeler du strømpen på benet, til den ligger tæt og uden folder.

Så let er det at tage strømper på – med den praktiske vejledning!

Topkvalitet

FRA FIRMAET BELSANA

Med Deres BELSANA-produkt fremstillet efter Deres individuelle mål bærer De resultatet af en mangeårig forskning og udvikling. Den omhyggelige udførelse og det høje kvalitetsniveau sikres og kontrolleres ved brug af den nyeste teknik. En regelmæssig certificering fra uafhængige tekniske institutter dokumenterer vores ansvarsbevidste omgang med vore produkter.

Dine specialfremstillede BELSANA-strømper er f.eks. i overensstemmelse med verdens strengeste kvalitets- og testbestemmelser for medicinske kompressionsstrømper (RAL-GZ 387/1) og opfylder OEKO-TEX® Standard 100, som foreskriver brug af sikre materialer og farvestoffer.

Sammen sørger vi for, at du holder dig i form!

Indikationer (se også retningslinjerne for medicinsk kompressionsterapi fra AWMF 037/005, stand 12/18)

- Forbedring af venøse symptomer og livskvalitet ved kroniske venelidelser.
- Forebyggelse af og terapi ved venøse ødemer
- Forebyggelse af og terapi ved venøse forandringer i huden
- Eksem og pigmentering
- Dermatoliposklerose og atrophie blanche
- Terapi og smertereducering ved Ulcus cruris venosum, også til forebyggelse af tilbagefald.
- Terapi ved arteriel og venøs betinget Ulcus cruris (se kontraindikationer!)
- Åreknuder
- Initial fase efter varikoserterapi
- Funktionel venøs insufficiens
- Venøse malformationer
- Venetrombose
- Tilstand efter trombose
- Posttrombotisk syndrom
- Tromboseforebyggelse hos mobile patienter
- Lymfeknuder
- Ødemer i graviditeten
- Posttraumatiske/postoperative ødemer
- Cyklisk idiopatiske ødemer
- Lipødemer fra stadie II
- Overbelastningstilstande som følge af ubevægelighed (arthrogent overbelastnings-syndrom, pareser og delpareser i ekstremiteten)
- Erhvervsbetingede ødemer (stillesiddende arbejde, stående arbejde)
- Medikamentøs betingede ødemer, hvis en omstilling ikke er mulig
- Adipositas med funktionel venøs insufficiens
- Inflammatoriske dermatoser i benene
- Kvalme, svimmelhed og problemer med overbelastede blodårer i graviditeten

- Tilstand efter brandsår
- Behandling af ar

Kontraindikationer Absolutte kontraindikationer:

- Fremskreden perifer arteriel okklusiv sygdom (Hvis en af disse parametre gælder: ABPI < 0,5, ankelarterietryk < 60 mmHg, tåtryk < 30 mmHg eller TcPO2 < 20 mmHg fodryg)
- Dekompenseret hjertefunktionsinsufficiens
- Septisk flebitis
- Phlegmasia coerulea dolens

Risici at være opmærksom på (behandlingsbeslutning under brug/afvejning af risiko):

- Løbende dermatoser
- Intolerance i forhold til materialerne i kompressionsstrømper
- Intolerance i forhold af kompressionsstrømpingredienser
- Svære sensibilitetsforstyrrelser i ekstremiteten
- Fremskreden perifer neuropati (f.eks. diabetes mellitus)
- Kronisk polyarthritis

Ved manglende overholdelse af disse kontraindikationer fralægger vi os ethvert ansvar.

⚠ Risici og bivirkninger

Medicinske kompressionsstrømper kan forårsage hudnekroser og trykskader på perifere nerver. Ved følsom hud kan der under kompressionsstrømperne opstå kløe og hudproblemer. Derfor kan en tilstrækkelig hudpleje i høj grad anbefales. Ved følgende symptomer bør du omgående tage strømperne af og rådføre dig med din læge angående fortsættelse af terapien: Tærne farves blå eller hvide, ubehag og følelsesløshed, tiltagende smerter, stakåndethed og svedeture, akutte indskrænkninger i bevægeligheden.

sen af terapien: Tærne farves blå eller hvide, ubehag og følelsesløshed, tiltagende smerter, stakåndethed og svedeture, akutte indskrænkninger i bevægeligheden.

Garanti

Opbevaringsevnen for medicinske kompressionsstrømper er ved passende opbevaring begrænset til 3 år. Hertil kommer bæretiden, der ved regelmæssig brug og korrekt pleje maksimalt er 6 måneder. Efter udløbet af denne frist er produkterne ikke længere omfattet af garantien. Grundlæggende er mangler, der skyldes almindelig slitage eller upassende brug, udelukket fra at være omfattet af garantien. Under upassende brug henregnes også den efter købet følgende forandring af produktet, der ikke er foretaget af fremstillingsvirksomheden. Små farveafvigelser, der kan opstå som følge af den enkelte farvningsproces, anses ikke for at være en defekt. Tilsvarende varer er derfor udelukket fra ombytning og returnering. Produktet er egnet til én bruger. Bli- ver det givet videre til andre med henblik på genbrug, ophører fabrikantens produktgaranti.

Bortskaffelse

Efter brug bør produktet bortskaffes i overensstemmelse med de lokale regler for affaldssortering.

Anmeldelsespligt

På grund af love og regler er patienter og brugere forpligtet til straks at melde det til fabrikanten og til de ansvarlige myndigheder (i Danmark Lægemiddelstyrelsen), hvis der i forbindelse med brug af produktet er optrådt alvorlige, utilsigtede hændelser, der har medført alvorlig forringelse i helbredstilstanden hos patienten eller førte til eller kunne have ført til dennes død.

BELSANA

BELSANA Medizinische Erzeugnisse
Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 23 · D-96052 Bamberg
www.belsana.de · service@belsana.de

Vertrieb Österreich: Ofa Austria
Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH
Wasserfeldstraße 20 · A-5020 Salzburg

Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 20
D-96052 Bamberg



Rev. 1/08/24

Til specialforretningen: Strømpedata til Deres arkiv.



Bemærk venligst: et dobbelt klæbebånd øger risikoen for hudreaktioner.

- Vigtige anvisninger**
- Brug kun kompressionsstrømper efter aftale med din læge
 - daglig brug og regelmæssige kontrolundersøgelser sikrer, at behandlingen giver det ønskede resultat
 - Søg at strømpene og rådgivning i, hvordan de tages rigtigt på, skal foretages af medicinsk uddannet personale
 - i tilfælde af akutte bensmerter eller reaktioner på huden skal du straks opsøge en læge
 - hvis hvidebåndet flyttes med jævne mellemrum, kan det forhindre hudirritation
 - i tilfælde af kvalitetsproblemer og mangler bedes du kontakte forhandleren
- Materialiesammensætning**
- Der benyttes polyamid (Polyamid), elastan (Lastan) og ved enkelte produkter bomuld (Baumwolle). Se venligst de konkrete specifikationer på den tekstil etiket, der er syet på strømpen.

- Advarselsformal**
- Kompressionsstrømper anvendes til terapeutisk behandling af flebologiske og lymfologiske sygdomme i arme og ben såvel som lipødemer. Århængigt af indikation vil forskellige produkter tages i brug.
- Vedligeholdelse**
- opbevares tørt, helst i den originale emballage;
 - strømper med silikonebelagt hvidebånd må ikke komme i kontakt med oprensningsmiddel, salve, creme eller fugtgivende sæbe, da det kan forringe hæftsevnen
 - Strømper skal holdes i hvidebåndet med ikke-permanent
 - regelmæssig fodpleje og optimal fodtøj er strengt nødvendigt
 - Udning (pilling) er normalt for tekstiler og ingen grund til reklamation
 - Uldning (pilling) er normalt for tekstiler og ingen grund til reklamation
 - du må aldrig selv reparere skader på strømperne, men skal i stedet returnere dem til den forhandler, hvor de er blevet købt

Rhinsten: Måltige beskadigelser af overøjet eller sarte overflader pga. rhinsten er undtaget fra garantien.

Sådan fungerer de medicinske kompressionsstrømper

- egnet til øjeblikkelig brug
- Anbefaling: bør vaskes inden første brugtagning.
- daglig vask (maks. 40 °C), i hånden eller på skåneprogram i maskinen
- separat med finvaskemidler (f.eks. BELSANA blødtvaskemiddel), undgå at bruge skyllemiddel
- skal skylles grundigt, centrifugering ved lav hastighed, så stoffet ikke vrides.
- lufttørres på et håndklæde eller på skåneprogram i tørretumbleren, må aldrig stryges og må ikke tørres på radiatoren eller i solen

BELSANA

- ☒ Tåler ikke kemisk rensning
 - ☒ Må ikke stryges
 - ☑ Tørres på skåneprogram
 - ☒ Må ikke bleges
 - ☑ Skånevask
- Vask BELSANA Impuls med vangen indad**
hvis BELSANA classic extra med vangen udad, og undlad at bruge skyllemiddel
- kompressionsstrømper**
rigtig vask

Deres personlige strømpepås.
Bare træk af, klæb sammen og opbevar.

made-to-measure
handed over by



B.

Vi rådgiver dig gerne!

gjenbestille.
medbring denne strømpepås, når du vil
udstede en ny recept til dig. Du skal
nødvendigt medicinsk, kan lægen
igen efter seks måneder, hvis det er
anbefaler vi, at du kontakter din læge
kompressionsterapi med varig effekt,
individuelle mål. Hvis du ønsker en
BELSANA – fremstillet i henhold til dine
medicinske kompressionsstrømper fra
Du har netop modtaget dine nye

INDIVIDUALLY
MADE FOR YOU

BELSANA

Strømpepås