


# BELSANA

## تعليمات ارتداء الجوارب مفتوحة الطرف

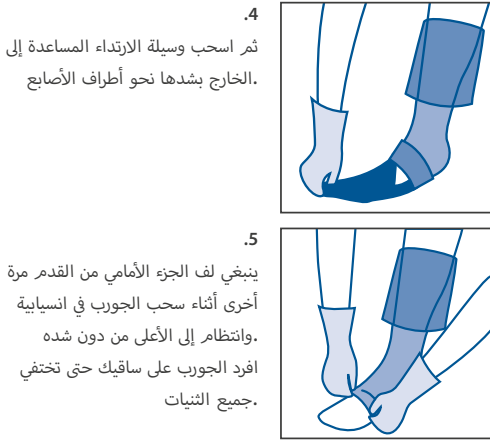

4. ثم اسحب وسيلة الارتداء المساعدة إلى الخارج بشدها نحو أطراف الأصابع.

5. ينبغي لف الجزء الأمامي من القدم مرة أخرى أثناء سحب الجوارب في انسيابية. وانتظام إلى الأعلى من دون شدة. افرد الجوارب على ساقيك حتى تختفي جميع التنيات



1. من الأسهل كثيرًا ارتداء الجوارب الضاغطة مفتوح الطرف باستخدام وسيلة الارتداء المساعدة من والمصنوعة من حرير الرايون. اجعل قدمك تنزلق في الوسيلة المساعدة حتى تصل إلى أعلى الكعب تمامًا.

2. ارتد الآن الجوارب بحيث يكون الكعب في الموضع الصحيح. سوف تجد هذا الأمر سهلاً عند استخدام وسيلة الارتداء المساعدة من BELSANA.

3. من أجل نزع الوسيلة المساعدة، لف الجزء الأمامي من القدم إلى الخلف كما هو موضح بالشكل

إن ارتداء الجوارب أمر سهل باتباع إرشاداتنا العملية.

لل بشرة. في حالة ظهور الأعراض التالية، يرجى خلع الجوارب على الفور والتحدث مع الطبيب حول استمرار العلاج: تلون أصابع القدم باللون الأزرق أو الأبيض، أحاسيس غير طبيعية وشعور بتنميل، الأمر متزايدة، ضيق في التنفس وتورق، تقيد حاد في الحركة.

### الضمان

مدة صلاحية الجوارب الطبية الضاغطة محددة بـ 3 سنوات إذا تم تخزينها بشكل صحيح. يضاف إلى تلك المدة وقت الارتداء، وهو 6 أشهر كحد أقصى مع الاستخدام المنتظم والعناية المناسبة. بعد انقضاء هذه الفترة، يتم استبعاد المنتجات من الضمان. وبشكل أساسي فإن الضمان لا يعد ساريًا في الحالات التي تظهر بها عيوب وأوجه قصور ناتجة عن التآكل العادي أو الاستخدام غير السليم. يشمل الاستخدام غير السليم أيضًا التغييرات اللائحة على المنتج التي لم يتم تنفيذها من قبل الشركة المصنعة. لا تعتبر الانحرافات اللونية الطفيفة، التي قد تنشأ بسبب عملية الصباغة الفردية، عيبًا. وبالتالي يتم استبعاد السلع المقابلة من التبادلات والعوائد. المنتج مخصص لعلاج مريض واحد فقط. إذا تم نقله إلى أشخاص آخرين لإعادة استخدامه، فسوف تنتفي عن الشركة المصنعة أي مسؤولية عن المنتج.

### التخلص من المنتج

بعد انتهاء عمر الاستخدام الافتراضي، يرجى التخلص من المنتج وفقًا للوائح المحلية.

### ضرورة التبليغ

بموجب اللوائح القانونية، نتعين على المرضى والمستخدمين إبلاغ الشركة المصنعة والجهة الوطنية المسؤولة (في ألمانيا، المعهد الاتحادي للأدوية والأجهزة الطبية "BfArM") على الفور بالحوادث الخطيرة التي حدثت ارتباطًا بالمنتج، والتي أدت أو يمكن أن تؤدي إلى تدهور كبير في الحالة الصحية أو الوفاة.

- التهاب جلدي في الساقين
- مشاكل الغثيان والدوار والاحتقان أثناء الحمل
- الحالة بعد الحروق
- علاج التندبات

### موانع الاستعمال: موانع الاستعمال النهائية:

- مرض انسداد الشرايين المحيطية المتقدم (عند تطبيق أحد هذه المعايير: (ABPI) > 0,5، أو الضغط الشرياني الكاحلي > 60 مم زئبق، أو ضغط إصبع القدم > 30 مم زئبق أو TCPo2 > 20 مم زئبق قوس القدم)
- قصور القلب اللأضعاف
- التهاب الوريد الإلتاني
- الالتهاب الوريدي المُزرق المؤلم

### المخاطر التي يجب وضعها في الاعتبار (يستند القرار العلاجي إلى تقييم الفوائد/المخاطر):

- الالتهاب الجلدي التآز
- عدم تحمل مواد الجوارب الضاغطة
- عدم تحمل مواد ال مكونات الجوارب الضاغطة
- اضطرابات حسية شديدة في الأطراف
- اعتلال الأعصاب المحيطية المتقدم (مثل داء السكري)
- التهاب المفاصل المزمن

### سيتم رفض تحمل أي مسؤولية إذا لم يتم اتباع موانع الاستعمال هذه.

### ⚠️ أي بن اجلا راث آل اورطاج مرلا

يمكن أن تسبب الجوارب الطبية الضاغطة نخزًا في الجلد، وتلثًا بالأعصاب الطرفية ناجمًا عن الضغط. يمكن أن تسبب ارتداء الجوارب الضاغطة مع البشرة الحساسة في حدوث حكة ومشاكل جلدية. لذلك، يوصى بالعناية المناسبة

# جودة متميزة

ن م BELSANA

مع هذا المنتج المخصص لك من BELSANA Bamberg، فإنك بذلك ترتدي نتاج سنوات عديدة من البحث والتطوير. نضمن لك دقة الصناعة ومستوى عاليًا من الجودة، ونتحكم فيهما باستخدام أحدث التقنيات. وتوثق الشهادات المنتظمة من مؤسسات الاختبار المستقلة تعاملنا المسؤول مع منتجاتنا.

التصنيع المُعدّ حسب المقاس يتوافق، على سبيل المثال BELSANA، مع معايير الجودة ولوائح الاختبارات الأكثر صرامة للجوارب الطبية الضاغطة (RAL-GZ 1/387) ويفي بمعيار OEKO-TEX® Standard 100، الذي يشترط استخدام مواد وصبغات غير ضارة.

معًا يمكننا ضمان الحفاظ على صحة قدميك!

# BELSANA

**BELSANA Medizinische Erzeugnisse**  
Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH  
Laubanger 23 · D-96052 Bamberg  
www.belsana.de · service@belsana.de

**Vertrieb Österreich: Ofa Austria**  
Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH  
Wasserfeldstraße 20 · A-5020 Salzburg

Ofa Bamberg GmbH  
Laubanger 20  
D-96052 Bamberg



Rev. 1/08/24



فيما يخص منتج التجارة المتخصصة: تخزين البيانات في السجل الخاص بك



يتم توزيع الجوارب الطبية الضاغطة من BELSANA في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك:

- ألمانيا
- النمسا
- هولندا
- بلجيكا
- إيطاليا
- فرنسا
- كندا
- الولايات المتحدة الأمريكية
- المكسيك
- كولومبيا
- فنزويلا
- الأرجنتين
- البرازيل
- تشيلي
- المكسيك
- كولومبيا
- فنزويلا
- الأرجنتين
- البرازيل
- تشيلي

فيما يخص منتج التجارة المتخصصة: تخزين البيانات في السجل الخاص بك

- النمسا
- هولندا
- بلجيكا
- إيطاليا
- فرنسا
- كندا
- الولايات المتحدة الأمريكية
- المكسيك
- كولومبيا
- فنزويلا
- الأرجنتين
- البرازيل
- تشيلي
- المكسيك
- كولومبيا
- فنزويلا
- الأرجنتين
- البرازيل
- تشيلي

## BELSANA



- جودة عالية
- متينة
- مريحة
- صحية
- آمنة
- خفيفة
- سهلة الارتداء
- سهلة العناية
- سهلة التخزين
- سهلة النقل
- سهلة الحفظ
- سهلة التخلص
- سهلة إعادة الاستخدام
- سهلة إعادة التدوير
- سهلة إعادة التوزيع
- سهلة إعادة التغليف
- سهلة إعادة التغليف
- سهلة إعادة التغليف
- سهلة إعادة التغليف
- سهلة إعادة التغليف

تحتوي الجوارب الطبية الضاغطة من BELSANA على مواد عالية الجودة، مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي. تتميز الجوارب الطبية الضاغطة من BELSANA بتصميمها الفريد، مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي. تتميز الجوارب الطبية الضاغطة من BELSANA بتصميمها الفريد، مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي.

تحتوي الجوارب الطبية الضاغطة من BELSANA على مواد عالية الجودة، مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي. تتميز الجوارب الطبية الضاغطة من BELSANA بتصميمها الفريد، مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي.

تحتوي الجوارب الطبية الضاغطة من BELSANA على مواد عالية الجودة، مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي. تتميز الجوارب الطبية الضاغطة من BELSANA بتصميمها الفريد، مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي.

تحتوي الجوارب الطبية الضاغطة من BELSANA على مواد عالية الجودة، مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي. تتميز الجوارب الطبية الضاغطة من BELSANA بتصميمها الفريد، مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي.

تحتوي الجوارب الطبية الضاغطة من BELSANA على مواد عالية الجودة، مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي. تتميز الجوارب الطبية الضاغطة من BELSANA بتصميمها الفريد، مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي.

made-to-measure

MADE FOR YOU  
INDIVIDUALLY

# BELSANA

الطبية المتخصصة  
للجوارب