



1. Întoarceți pe dos ciorapul până la nivelul labei piciorului. Introduceți degetele de la picioare, apoi trageți peste laba piciorului.

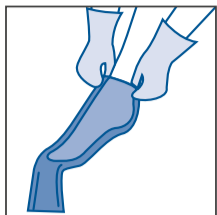

2. Acum trageți ciorapul cu atenție peste călcâi. Vă rugăm să evitați să trageți ciorapul de marginea superioară sau de banda adezivă.

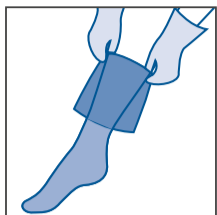

3. Trageți restul ciorapului uniform pe lungimea piciorului, fără a-l întinde. La final distribuiți ciorapul uniform, astfel încât să nu rămână cute.

Purtarea lor este ușoară – cu instrucțiunile practice.

Calitate de top

DE LA FIRMA BELSANA

Cu produsul dvs. BELSANA realizat la comandă purtați rezultatul anilor de cercetare și dezvoltare. Prelucrarea atentă și nivelul ridicat de calitate sunt asigurate și controlate prin utilizarea celei mai moderne tehnologii. Certificările periodice de către institutele de testare independente documentează gestionarea responsabilă a produselor noastre.

Produsul dvs. BELSANA realizat la comandă corespunde, de exemplu, cu cele mai stricte reglementări de calitate și testări din lume pentru ciorapii medicali de compresie (RAL-GZ 387/1) și îndeplinește standardul OEKO-TEX® 100, care stipulează utilizarea de materiale și coloranți inofensivi.

Împreună ne vom asigura că rămâneți pe picioare în formă!

Indicații (a se vedea și Directiva Medicală privind Tratamentul Compresiv AWMF 037/005, versiunea 12/18)

- Ameliorarea simptomelor venoase și a calității vieții în cazul bolilor venoase cronice
- Prevenția și tratamentul edemelor venoase
- Prevenția și tratamentul modificărilor de origine venoasă a tegumentelor
- Eczeme și pigmentări
- Dermatoliposcleroză și atrofie albă
- Tratamentul și ameliorarea durerilor în cazul Ulcus cruris venosum și profilaxia recidivelor
- Tratamentul Ulcus cruris arterial și venos (a se vedea și contraindicațiile)
- Varicoză
- Faza inițială de după tratamentul varicozei
- Insuficiență venoasă funcțională
- Malformații venoase
- Tromboză venoasă
- Starea de după tromboză
- Sindrom posttrombotic
- Profilaxia trombozei în cazul pacienților mobili
- Limfedeme
- Edeme în sarcină
- Edeme posttraumatice/postoperatorii
- Edeme ciclice idiopatice
- Lipedeme începând cu stadiul II
- Congestii în urma imobilizării (sindrom de congestie artrogen, pareze și pareze parțiale ale extremității)
- Edeme apărute în urma expunerii profesionale (profesii care presupun statul în picioare sau șezutul pe durate mari de timp)
- Edeme cauzate de medicamente, atunci când acestea nu pot fi schimbate
- Obezitate cu insuficiență venoasă funcțională
- Dermatозe inflamatorii ale picioarelor
- Stare după arsuri

- Greutăți, amețeli și senzație de congestie în sarcină
- Tratamentul cicatricilor

Contraindicații: Contraindicații absolute:

- Boală arterială periferică ocluzivă în stadiu avansat (în cazul în care se aplică unul dintre acești parametri: indicele gleznă-braț (IGB) < 0,5, tensiunea arterială la nivelul gleznei < 60 mmHg, tensiunea arterială la nivelul degetelor de la picioare < 30 mmHg sau presiunea transcutanată a oxigenului (TcPO2) < 20 mmHg la nivelul căputei)
- Insuficiență cardiacă decompensată
- Flebită septică
- Phlegmasia coerulea dolens

Riscuri care trebuie luate în considerare (decizia terapeutică având în vedere raportul beneficii/riscuri):

- Dermatoze umede
- Alergie la materialele din care sunt fabricați ciorapii compresivi
- Alergie la ingredientelor din care sunt fabricați ciorapii compresivi
- Tulburări senzoriale grave ale extremității
- Neuropatie periferică în stadiu avansat (de ex. diabet zaharat)
- Poliartrită cronică

În cazul nerespectării contraindicațiilor nu ne asumăm nicio răspundere.

⚠ Riscuri și efecte adverse

Ciorapii compresivi medicali pot cauza necroze ale pielii și leziuni ale nervilor periferici induse de presiune. În cazul pielii sensibile, ciorapii compresivi pot provoca mâncărimi și alte probleme ale pielii. Prin urmare, se recomandă o igienă adecvată a tegumen-

telor. Vă rugăm să îndepărtați imediat ciorapii și să discutați continuarea tratamentului cu medicul dvs. în cazul în care apar următoarele simptome: învinețirea sau albirea degetelor de la picioare, senzații ciudate sau de amorțeală, dureri progresive, dispnee și transpirație excesivă, limitări acute ale mișcărilor.

Garanție

Ciorapii compresivi medicali pot fi depozitați în condiții corecte timp de 3 ani. Totodată, trebuie ținut cont și de durata de purtare de cel mult 6 luni, în condițiile unei utilizări regulate și a unei îngrijiri corespunzătoare. După expirarea acestui termen, produsele nu mai sunt acoperite de garanție. De la garanție mai sunt excluse, din principiu, și defectele apărute în urma uzurii obișnuite sau a unei utilizări neconforme. Utilizare neconformă înseamnă și modificarea, după achiziționare, a produsului, care nu a fost realizată de către firma producătoare. Micile deviații de culoare, care pot apărea ca urmare a procesului individual de vopsire, nu sunt considerate defecte. Prin urmare, mărfurile corespunzătoare sunt excluse de la schimburi și returnări. Produsul este destinat utilizării de către un singur pacient. În cazul în care este transmis spre utilizare altor persoane, producătorul nu mai are obligația de acordare a garanției.

Eliminarea

Vă rugăm ca la finalul duratei de utilizare să eliminați produsul în conformitate cu reglementările locale.

Obligația de notificare

Conform prevederilor legale, pacienții și utilizatorii au obligația să notifice imediat producătorul și autoritatea competentă la nivel național (în Germania, BfArM) în legătură cu incidentele grave apărute în legătură cu produsul, care au dus sau ar fi putut duce la o înrăutățire dramatică a stării de sănătate sau chiar la deces.

BELSANA

BELSANA Medizinische Erzeugnisse
Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 23 · D-96052 Bamberg
www.belsana.de · service@belsana.de

Vertrieb Österreich: Ofa Austria
Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH
Wasserfeldstraße 20 · A-5020 Salzburg

Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 20
D-96052 Bamberg



Rev. 1/08/24



Pentru farmacie: Datele ciorapilor pentru arhivare.



Pierțel decorative: Eventualele deteriorări ale articolelor decorative sau ale suprafețelor sensibile cauzate de pierțel decorative sunt excluse din garanție.

este îmbunătățită, iar fluxul limfatic este sporit.

Efectele ciorapilor compresivi medicali: În urma utilizării produselor conform indicațiilor și datorită presiunii controlate exercitate, întoarcerea sângelui este

- separat cu detergent delicat (de ex. detergent BELSANA cleanstar®), nu folosiți balsam de rufe
- delicat de spălare al măștii
- recomandare: spălați ciorapii înainte de prima purtare
- adevați pentru folosirea imediată
- uscătorului, nu călcați niciodată și nu uscați pe calorifer sau la soare
- uscați la aer pe un prosop sau la programul delicat al uscătorului, nu călcați niciodată și nu uscați pe calorifer
- clătiți riguros, centrifugați delicat, dar nu stoarceți
- separat cu detergent delicat (de ex. detergent BELSANA cleanstar®), nu folosiți balsam de rufe
- delicat de spălare al măștii
- recomandare: spălați ciorapii înainte de prima purtare
- adevați pentru folosirea imediată

Indicații importante

- a se păstra la loc uscat, ideal în ambalajul original, protejați de lumina directă a soarelui și de căldură
- Evitați contactul ciorapilor cu benzii adezive acoperite cu silicon cu solvent, unguente, creme și loțiuni hidratante de spălare, deoarece aderenta poate fi afectată permanent
- acordată atenție îngrijirii regulate a picioarelor și încălțămîntei corespunzătoare
- scămoșarea reprezintă un proces normal în cazul textilor și nu reprezintă un motiv de reclamație
- dacă întâmpinați probleme legate de calitate sau dacă aveți reclamații, vă rugăm să contactați distribuitorul specializat
- depășirea ușoară regulată a benzii adezive poate preveni iritarea pielii
- în caz de dureri acute ale piciorului sau reacții cutanate, vă rugăm să consultați imediat medicul
- personalul instruit din punct de vedere medical trebuie să ofere indicații și recomandări cu privire la modul corect de purtare
- persoanelor cu probleme de vedere medical succesul tratamentului
- purtarea zilnică și controlabile regulate asigură consultarea unui medic
- purtați ciorapii de compresie numai după

Compoziția materialului

Se utilizează poliamidă (Polyamid), elastan (Elastan) și pentru unele produse, bumdac (Baumwolle) sau lână merinos (Merinowolle). Pe eticheta textilă cusută pe ciorapii dvs. se află toate datele concrete.

Atenție: O bandă adezivă dublă crește riscul de reacții cutanate.

BELSANA

- Nu curățați chimic
- Nu călcați
- Uscati cu grijă
- Nu utilizați înălbitori
- Ciclu de spălare pentru rufe delicate
- Spălați BELSANA impus pe partea dreaptă, respectiv spălați BELSANA ciorapii de compresie
- Spălați corect
- Spălați BELSANA impus pe partea dreaptă, respectiv spălați BELSANA ciorapii de compresie
- folosiți balsam de rufe!
- classic extra pe partea stângă și nu
- folosiți balsam de rufe!
- Ciclu de spălare pentru rufe delicate
- Nu utilizați înălbitori
- Uscati cu grijă
- Nu călcați
- Nu curățați chimic

Certificatul personal pentru ciorapi. Pur și simplu deslipiți-l, pliați-l și păstrați-l în siguranță.

Sunteam bucuroși să vă oferim staturii pentru ciorapi la următoarea comandă. Vă rugăm să prezentați acest certificat, acesta vă poate elibera o nouă rețetă. necesar din punct de vedere medical, nou medical după șase luni. Dacă este lung, vă recomandăm să consultați din compresie să fie eficientă pe termen individuală. Pentru ca terapia de ționată conform măsurătorilor dvs. Tocmai ați primit noii ciorapi medicali

Certificat pentru ciorapi

BELSANA

INDIVIDUALLY MADE FOR YOU

made-to-measure

handed over by

