


BELSANA

GIYME TALIMATLARI, AÇIK BURUN



1. Ürünle birlikte gelen BELSANA giyme yardımcısı ile açık uçlu kompresyon çoraplarınızı çok daha kolay bir şekilde giyebilirsiniz. Ayağınızı, giyme yardımcısı topuğun hemen üstüne gelecek şekilde yardımcının içinden geçirin.

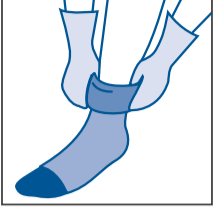

2. Çorabı, topuk doğru yerde olacak şekilde çekin. BELSANA giyme yardımcısı ile bunu yapmak çok kolaydır.



3. Giyme yardımcısını çıkarmak için çorabın ön ayak kısmını geri çekin.



4. Ardından giyme yardımcısını ayak parmaklarınızın üzerinden öne doğru çekin.



5. Çorabın ön ayak kısmı daha sonra tekrar düzgün bir şekilde ileri doğru çekilebilir. Sonra çorabın kalan kısmını germeden eşit bir şekilde çekin. Son olarak çorabı kırışksız hale gelinceye kadar bacağınızın üzerinde dağıtın.

Pratik talimatlarımızı izleyerek çoraplarınızı giymek çok kolaydır.

En üstün kalite

BELSANA'DAN

Size özel BELSANA Bamberg ürününü giyerken, yılların araştırma ve geliştirmesinin sonucu olan bir ürünü kullanmaktasınız. Özenli üretim ve yüksek kalite, en gelişmiş teknolojiler kullanılarak denetlenir ve elde edilir. Sorumlu ve bilinçli üretim yöntemlerimiz, bağımsız test kuruluşlarının verdiği sertifikalarla belgelendirilir.

Örneğin özel üretilmiş BELSANA çorabınız, tıbbi kompresyon çorapları (RAL-GZ 387/1) için dünya çapındaki en sıkı kalite ve test düzenlemelerine uygundur ve güvenli malzeme ve boyaların kullanılmasını şart koşan OEKO-TEX® Standardı 100'ü karşılar.

Ayaklarınızın üzerinde sağlıklı kalabilmenizi hep beraber sağlıyoruz!

Endikasyonlar (12/18 tarihli AWMF 037/005 Tıbbi Kompresyon Tedavisi yönergeseine de bakın)

- Venöz semptomların ve kronik venöz hastalıklarda yaşam kalitesinin iyileştirilmesi
- Venöz ödemlerin önlenmesi ve tedavisi
- Venöz cilt değişikliklerinin önlenmesi ve tedavisi
- Egzama ve pigmentasyon
- Dermatoliposkleroz ve beyaz atrofi
- Nüksün önlenmesi dahil olmak üzere venöz bacak ülserlerinde tedavi ve ağrı azaltma
- Arteriyel ve venöz bacak ülserlerinin tedavisi (bkz. Kontrendikasyonlar!)
- Varis
- Varis tedavisinden sonraki ilk aşama
- Fonksiyonel venöz yetmezlik
- Venöz malformasyonlar
- Venöz tromboz
- Tromboz sonrası durum
- Posttrombotik sendrom
- Mobil hastalarda tromboz profilaksisi
- Lenfödem
- Hamilelikte ödem
- Travma sonrası/ameliyat sonrası ödem
- Siklik idiyopatik ödem
- Evreden itibaren lipödem
- Hareketsizliğin bir sonucu olarak oluşan konjesyon durumları (artrojenik staz sendromu, ekstremitelerde parez ve kısmi parez)
- Meslek kaynaklı ödem (ayakta, oturarak yapılan işler)
- Değişiklik mümkün değilse ilaca bağlı ödem
- Fonksiyonel venöz yetmezlik eşliğinde adipozite
- Bacaklarda iltihaplı dermatoz
- Hamilelikte bulantı, baş dönmesi ve konjesyon şikayetleri

- Yanık sonrası durum
- Yara izi tedavisi

Kontrendikasyonlar

Mutlak kontrendikasyonlar:

- İleri periferik arter hastalığı (bu parametrelerden biri geçerli olduğunda: ABPI < 0,5, ayak bileği atardamar basıncı < 60 mmHg, ayak parmağı basıncı < 30 mmHg veya TcPO2 < 20 mmHg ayağın üst kısmı)
- Dekompans kalp yetmezliği
- Septik flebit
- Phlegmasia coerulea dolens

Dikkat edilmesi gereken riskler (fayda/risk değerlendirilmesine dayalı tedavi kararı)

- Eksüdatif dermatozlar
- Kompresyon çorabı malzemelerine karşı intolerans
- Varis çorapları içerik maddelerinin uyumsuzluğu
- Ekstremitelerde şiddetli duyu bozuklukları
- İleri periferik nöropati (örneğin diabetes mellitus)
- Kronik poliartrit
- Chronic polyarthrit

Bu kontrendikasyonların dikkate alınmaması durumunda hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

⚠ Riskler ve yan etkiler

Medikal kompresyon çorapları, periferik sinirlerde cilt nekrozuna ve basınç hasarına neden olabilir. Kompresyon çorapları, hassas ciltte kaşıntıya ve cilt sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle yeterli ölçüde cilt bakımı yapılması tavsiye edilir. Aşağıdaki belirtilerin görülmesi durumunda lütfen çorapları he-

men çıkarın ve tedaviye devam edip edilmeyeceği konusunda doktora danışın: Ayak parmaklarında mavi veya beyaz renklenme, anormal hisler ve uyuşukluk, artan ağrı, nefes darlığı ve terleme, akut kısıtlı hareketlilik.

Garanti

Tıbbi kompresyon çoraplarının raf ömrü, uygun şekilde saklandığında azami 3 yıldır. Buna ek olarak kullanım süresi, düzenli kullanım ve uygun bakım ile maksimum 6 aydır. Bu sürenin sonunda ürünler garanti kapsamından çıkar. Normal aşınma ve yıpranma veya usulüne aykırı kullanım nedeniyle meydana gelen kusurlar esas olarak garanti kapsamı dışındadır. Ürün üzerinde üretici tarafından gerçekleştirilmemiş, sonradan yapılan değişiklikler de usulüne aykırı kullanım olarak kabul edilir. Bireysel boyama işlemi nedeniyle ortaya çıkabilecek hafif renk sapmaları bir kusur olarak kabul edilmez. Bu nedenle ilgili mallar borsalardan ve iadelerden hariç tutulur. Ürün tek bir kullanıca için tasarlanmıştır. Yeniden kullanım için başkalarına verilmesi durumunda, üreticinin ürün sorumluluğu sona erer.

Bertaraf etme

Kullanım ömrünün sonunda lütfen ürünü bölgenizdeki yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

Bildirim zorunluluğu

Yasal düzenlemeler nedeniyle, hastalar ve kullanıcılar, sağlık üzerinde olumsuz bir sonuca veya ölüme yol açan ya da yol açabilecek, ürünle ilgili ciddi olayları üreticiye ve sorumlu ulusal makama (Almanya'da BfArM) derhal bildirmekle yükümlüdür.

BELSANA

BELSANA Medizinische Erzeugnisse
Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 23 · D-96052 Bamberg
www.belsana.de · service@belsana.de

Vertrieb Österreich: Ofa Austria
Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH
Wasserfeldstraße 20 · A-5020 Salzburg

Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 20
D-96052 Bamberg



Rev. 1/08/24



Uzman bayi için: arşivinizdeki çorap bilgileri.



Lütfen dikkate alınız: Çift taraflı bant cilt reaksiyonu riskini artırır.

Süs tasarlama: Süs tasarlama kaynağından elde edilen süsler ve hassaslaşan yüzeyler garanti kapsamına dahil değildir.

BELSANA

- ✗ Kuru temizleme yapmayın
- ✗ Ütülerle mayın
- ✗ Nazikçe kurutun
- ✗ Ağartıcı kullanmayın
- ✗ Hassas ayarda yıkayın

BELSANA impuls çorabını lütfen tersini çevirmeden, BELSANA classic extra çorabını ise tersini çevirerek yıkayın ve yumuşatıcı kullanmayın!

Kompresyon çoraplarını doğru şekilde yıkayın

Tıbbi kompresyon çoraplarının etkisi
İlgili endikasyona göre uyularının üründe ve kontrolü basınca kan akışı hızlandırılır, dokudaki mikro sirkülasyon iyileştirilir ve lenf akışı artırılır.
Yıkama
Her gün (maks. 40°C) elle veya makinenin hassas tavsiye: ilk kullanımda önce yıkayın
Hemen kullanıma uygundur
Hassas gamışı deterjanıyla (örneğin "BELSANA cleanstart") deterjan ("yumuşatıcı kullanmadan ayrı olarak yıkayın
İyice durulayın, makinanede yavaş hızda sıkın, elle bükerek sıkmayın.
• Her bir yüzünde havayla veya kurutucunun hassas ayarında kurutun, asla ütülerle ve ısıtıcılar üzerinde koymayın veya güneşte kurutmayın

Kullanım amacı

Bakım
• Kuru bir şekilde ve mümkünse orijinal ambalajında, güneşten ve ısıdan koruyarak saklamazınız tavsiye edizir.
• Silikon kaplı yapışkan bantlı çoraplar, çözücüler, merhemler, kremler ve nemlendirici yıkama losyonları ile temas etmemelidir. Aksi takdirde yapışkan bantların yapışma özelliği kalıcı olarak bozulabilir.
• Düzenli ayak bakımı yapmaya ve uygun ayakkabılar giymeye dikkat edin
• Lt topakları (pilling) tekstilde normal bir süreçtir ve şikayet nedeni olmayacaktır.
• Çorapları hasarları kendi başınıza onarmayın, çorabı satın aldığınız tıbbi ürün satıcısına geri götürün

Malzeme bileşimi

Önemli bilgiler
• Kompresyon çoraplarını sadece doktorunuza danıştıktan sonra kullanın
• Her gün giyme ve düzenli kontrol müayeneleli, tedavinin başlılı olmasını sağlayın
• Çorapları tıbbi eğitim almış uzmanlar tarafından teslim edilmiş ve çorapları nasıl doğru şekilde giyeceğiniz konusunda size tavsiyede bulunmalıdır
• Akut bacak ağrısı veya cilt tahrişi yaşarsanız lütfen derhal doktorunuza danışın
• Yapışkan bantın düzenli olarak hafifçe hareket ettirilmesi cildin tahriş olmasını önleyebilir
• Kalite sorunları ve şikayetler için lütfen tıbbi ürün satıcısıyla iletişime geçin

Endikasyona bağlı olarak farklı ürünler tercih edilir. Hastalıkların yanı sıra lipödem tedavisinde de kullanılmaktadır.

Kompresyon çorapları, kol ve bacaklarda flebolojik ve lenfolojik Poliamid (Polyamid), elastan (Elastan) ve bazı türlerde pamuk (Baumwolle). Spesifik bilgiler, çorabınıza dikilmiş tekstil etiketinde mevcuttur.

Kişisel Çorap Bilgi Kartını, Yapmanız gereken kopartmak, yapıştırmak ve güvenli bir yerde saklamaktır.

Çorap kimlik kartı
Kişisel ölçülerinize göre üretilen yeni BELSANA tıbbi kompresyon çorabınız kullanılmamıza sunulmuştur. Uzun süreli etkili kompresyon terapisi için altı ay sonra doktorunuza tekrar danışın. Tıbbi ihtiyaç durumunda doktorunuza size yeni bir reçete verebilir. Lütfen yeniden sipariş vermeye için bu çorap kartını yanınızda memnuniyet duyarız!

made-to-measure

MADE FOR YOU
INDIVIDUALLY

BELSANA

handed over by

