



Merkzettel für Ihre Waschmaschine

Kompressionsstrümpfe richtig waschen

Bitte auf links waschen und keinen Weichspüler verwenden!

Schonwaschgang

Nicht bleichen

Schonend trocknen

Nicht bügeln

Nicht chemisch reinigen



BELSANA

BELSANA

Damit Ihre Nachbestellung bei der nächsten Verordnung ganz einfach und unkompliziert ist, finden Sie links **Ihren persönlichen Strumpfpass** mit allen maßgeblichen Informationen. Einfach abziehen, zusammenkleben und gut aufbewahren.

Mit besten Empfehlungen
Ihr BELSANA Team

Waschen

- für den sofortigen Gebrauch geeignet
- Empfehlung: vor dem ersten Tragen waschen
- tägliche Wäsche (max. 40°C), von Hand oder im Schonwaschgang der Maschine
- separat mit Feinwaschmitteln (z.B. „BELSANA blau40 Waschmittel“), keine Weichspüler verwenden
- gut ausspülen, schonend schleudern aber nicht wringen
- auf einem Handtuch an der Luft oder im Schongang Ihres Trockners trocknen, niemals bügeln und nicht auf der Heizung oder in der Sonne trocknen

Materialzusammensetzung

Verwendet werden Polyamid, Elastan und Baumwolle. Die konkreten Angaben entnehmen Sie bitte dem in Ihrem Strumpf eingenahten Textiletikett.

Pflegen

- trocken, am besten in Originalverpackung lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen
- Strümpfe mit silikonbeschichteten Haftbändern nicht mit Lösungsmitteln, Salben, Cremes und rückfettenden Waschlotionen in Berührung bringen, da die Haftfähigkeit dauerhaft beeinträchtigt werden kann
- unbedingt auf regelmäßige Fußpflege und einwandfreies Schuhwerk achten
- Faserknötchen (Pilling) sind ein normaler Vorgang bei Textilien und kein Reklamationsgrund
- Schäden an Strümpfen niemals selbst reparieren, sondern zurück zu dem Fachhändler bringen, bei dem der Strumpf gekauft wurde

⚠ Wichtige Hinweise

- Kompressionsstrümpfe nur nach Rücksprache mit dem Arzt tragen
- tägliches Tragen und regelmäßige Kontrolluntersuchungen sichern den Behandlungserfolg
- Abgabe und Beratung zum richtigen Anziehen der Strümpfe muss durch medizinisch geschultes Fachpersonal erfolgen bei akuten Beinschmerzen oder Hautreaktionen bitte umgehend den Arzt aufsuchen
- regelmäßiges leichtes Versetzen des Haftbands kann Hautirritationen vorbeugen
- bei Qualitätsproblemen und Beanstandungen bitte an den Fachhändler wenden

Wirkprinzip medizinischer Kompressionsstrümpfe

Durch auf die jeweilige Indikation abgestimmte Produkte und kontrollierten Druck werden der Blutrückfluss beschleunigt, die Mikrozirkulation im Gewebe verbessert und der Lymphfluss gesteigert.

Rev. 1/04/21

für die Apotheke: Strumpfdaten für Ihre Archivierung



BELSANA Medizinische Erzeugnisse
Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 23 · D-96052 Bamberg · www.belsana.de
Wasserfeldstr. 20 · A-5020 Salzburg
Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 20
D-96052 Bamberg

BELSANA

Spitzenqualität

aus dem Hause BELSANA

Mit Ihrer BELSANA-Maßanfertigung tragen Sie das Ergebnis langjähriger Forschung und Entwicklung. Die sorgfältige Verarbeitung und das hohe Qualitätsniveau werden durch den Einsatz modernster Technik gesichert und kontrolliert. Regelmäßige Zertifizierungen und kontrollierter Prüfprozess dokumentieren unsere verantwortungsvollen Umgang mit unseren Produkten.

Ihre BELSANA-Maßanfertigung entspricht beispielsweise den weltweit strengsten Güte- und Prüfungsbestimmungen für medizinische Kompressionsstrümpfe (RAL-GZ 387/1) und erfüllt den Öko-Text Standard 100, der die Verwendung von unbedenklichen Materialien und Farbstoffen vorschreibt.

Gemeinsam sorgen wir dafür, dass Sie fit auf den Beinen bleiben!

- #### Indikationen
- (die komplette Liste finden Sie in der Letzlinie AMMF 037/005, Stand 12/18)
 - Verbesserung venöser Symptome und der Lebensqualität bei chronischen Venenkrankheiten
 - Prävention und Therapie venöser Ödeme
 - Hautveränderungen
 - Dermatoposklerose und Atrophie blanche
 - Therapie des arteriell und venös bedingten Ulcus cruris (siehe Kontraindikationen!)
 - Varikose
 - Initiale Phase nach Varikosetherapie
 - Funktionelle venöse Insuffizienz
 - Venöse Malformationen
 - Venenthrombose
 - Zustand nach Thrombose
 - Postthrombotisches Syndrom
 - Thromboseprophylaxe bei mobilen Patienten
 - Ödeme in der Schwangerschaft
 - Lipödeme ab Stadium II
 - Stauungszustände infolge von Immobilität (arthrogenes Stauungssyndrom, Paresen und Teilparesen der Extremität)
 - Adipositas mit funktioneller venöser Insuffizienz
 - Entzündliche Dermatosen der Beine
 - Übelkeit, Schwindel und Stauungsbeschwerden in der Schwangerschaft
 - Zustand nach Verletzungen
 - Narbenbehandlung

Absolute Kontraindikationen

- fortgeschrittene periphere arterielle Verschlusskrankheit
- dekompensierte Herzinsuffizienz
- septische Phlebitis
- Phlegmasia coerulea dolens

Relative Kontraindikationen

- ausgeprägte nässende Dermatosen
- Unverträglichkeit auf Kompressionsstrumpfmateriale
- schwere Sensibilitätsstörungen
- der Extremität
- (z. B. Diabetes mellitus)

Bei Nichtbefolgung der Kontraindikationen

wird jede Haftung abgelehnt.

Risiken und Nebenwirkungen

Bei empfindlicher Haut kann es unter den Kompressionsstrümpfen zu Juckreiz und Hautproblemen kommen. Daher wird eine adäquate Hautpflege empfohlen.

Meldpflicht

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften sind Patienten und Anwerder verpflichtet, im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretene schwerwiegende Vorfälle, die zu einer wesentlichen Verschlechterung des Gesundheitszustandes oder zum Tod geführt haben oder hätten führen können, dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde (in Deutschland BfArM) unverzüglich zu melden.

Entsorgung

Nach Ende der Nutzungsdauer entsorgen Sie das Produkt bitte gemäß den örtlichen Bestimmungen. Hersteller.





Gewährleistung

Die Lagerfähigkeit von medizinischen Kompressionsstrümpfen ist bei sachgemäßer Lagerung auf 3 Jahre begrenzt. Hinzu kommt die bei regelmäßigem Gebrauch und ordnungsgemäßer Pflege maximal 6 Monate beträgt. Nach Ablauf dieser Frist sind die Produkte von der Gewährleistung ausgenommen. Grundsätzlich von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Mängel, welche auf üblichen Verschleiß bzw. unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind. Unter unsachgemäßen Gebrauch fällt auch die nachträgliche Veränderung des Produktes, welche nicht von der Herstellerrfirma durchgeführt worden ist. Das Produkt ist zur Versorgung eines einzigen Patienten vorgesehen. Wird es zum Wiedereinsatz an andere Personen weitergegeben, erlischt die Produkthaftung des Herstellers.

So geht das Anziehen leicht – mit der praktischen Anleitung!

Anziehanleitung Beinstrumpf mit offener Spitze

1. Das Anziehen Ihrer Kompressionsstrümpfe mit offener Spitze erleichtern Sie sich wesentlich mit einer BELSANA Anziehhilfe. Schieben Sie mit dem Fuß so in die Anziehhilfe, dass diese bis kurz über die Ferse reicht.
2. Nun ziehen Sie den Strumpf soweit an, dass die Ferse an der richtigen Stelle sitzt. Mit der BELSANA Anziehhilfe ist dies ganz leicht.
3. Zum Ausziehen der Anziehhilfe stülpen Sie den Vorderteil des Strumpfes zurück.

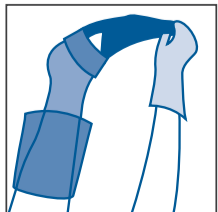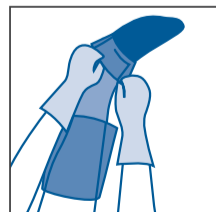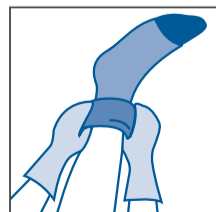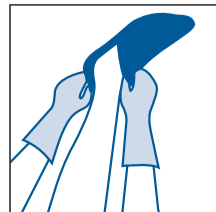

4. Dann ziehen Sie die Zehenspitzen nach vorne über die Zehenspitzen heraus.
5. Anschließend wird der Vorderteil des Strumpfes wieder ordnungsgemäß nach vorne gerollt. Dann streifen Sie den restlichen Strumpf gleichmäßig hoch, ohne ihn zu dehnen. Zum Schluss verteilen Sie den Strumpf am Bein, bis er fallentfrei anliegt.

