

Patientenname	Auftragsdatum/-nummer	Hilfsmittelnummer
	Produktionsnummer	

Arm links rechts

Länge Umfang

IC-G	cG
IC-F	cF
IC-E	cE
IC-D	cD
IC-C1	cC1
	cC
cX	
cB	
cA	

Hand links rechts

Finger geschlossen

1	
2	
3	
4	
5	

Finger	Umfänge	Länge
	cZ cY cX	IX-Z
1		
2		
3		
4		
5		

für die Apotheke: Maßschema kann ggf. bei der Krankenkasse zur Abrechnung eingereicht werden

Spitzenqualität

aus dem Hause BELSANA

Mit Ihrer BELSANA-Maßanfertigung tragen Sie das Ergebnis langjähriger Forschung und Entwicklung. Die sorgfältige Verarbeitung und das hohe Qualitätsniveau werden durch den Einsatz modernster Technik gesichert und kontrolliert. Regelmäßige Zertifizierungen unabhängiger Prüfinstitute dokumentieren unseren verantwortungsvollen Umgang mit unseren Produkten.

Ihre BELSANA-Maßanfertigung entspricht beispielsweise den weltweit strengsten Güte- und Prüfungsbestimmungen für medizinische Kompressionsstrümpfe (RAL-GZ 387/1) und erfüllt den Öko-Text Standard 100, der die Verwendung von unbedenklichen Materialien und Farbstoffen vorschreibt.

Gemeinsam sorgen wir dafür, dass Sie fit bleiben!

- Indikationen**
(die komplette Liste finden Sie in der Leitlinie AWMF 037/005, Stand 12/18)
- Verbesserung venöser Symptome und der Lebensqualität bei chronischen Venenkrankheiten
 - Prävention und Therapie venöser Ödeme
 - Prävention und Therapie venöser Hautveränderungen
 - Dermatoiposklerose und Atrophie blanche
 - Therapie des arteriell und venös bedingten Ulcus cruris (siehe Kontraindikationen!)
 - Varikose
 - Initiale Phase nach Varikose-therapie
 - Funktionelle venöse Insuffizienz
 - Venöse Malformationen
 - Venenthrombose
 - Zustand nach Thrombose
 - Postthrombotisches Syndrom
 - Thromboseprophylaxe bei mobilen Patienten
 - Lymphödeme
 - Ödeme in der Schwangerschaft
 - Lipödeme ab Stadium II
 - Stauungszustände infolge von Immobilitäten (arthrogenes Stauungssyndrom, Paresen und Teilparesen der Extremität)
 - Adipositas mit funktioneller venöser Insuffizienz
 - Entzündliche Dermatosen der Beine
 - Übelkeit, Schwindel und Stauungsbeschwerden in der Schwangerschaft
 - Zustand nach Verbrennungen
 - Narbenbehandlung

- Absolute Kontraindikationen**
- fortgeschrittene periphere arterielle Verschlusskrankheit
 - dekompensierte Herzinsuffizienz
 - septische Phlebitis
 - Phlegmasia coerulea dolens
- Relative Kontraindikationen**
- ausgeprägte nässende Dermatosen
 - Unverträglichkeit auf Kompressionsstrümpfmateriale
 - schwere Sensibilitätsstörungen der Extremität
 - fortgeschrittene periphere Neuropathie (z. B. Diabetes mellitus)

Gewährleistung
Die Lagerfähigkeit von medizinischen Kompressionsstrümpfen ist bei sachgemäßer Lagerung auf 3 Jahre begrenzt. Hinzu kommt die Tragezeit, die bei regelmäßigem Gebrauch und ordnungsgemäßer Pflege maximal 6 Monate beträgt. Nach Ablauf dieser Frist sind die Produkte von der Gewährleistung ausgeschlossen. Grundsätzlich von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Mängel, welche auf üblichen Verschleiß bzw. unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind. Unter unsachgemäßen Gebrauch fällt auch die nachträgliche Veränderung des Produktes, welche nicht von der Herstellerfirma durchgeführt worden ist. Das Produkt ist zur Versorgung eines einzigen Patienten vorgesehen. Wird es zum Wiedereinsatz an andere Personen weitergegeben, erlischt die Produkthaftung des Herstellers.

Entsorgung
Nach Ende der Nutzungsdauer entsorgen Sie das Produkt bitte gemäß den örtlichen Bestimmungen.

Meldepflicht
Aufgrund gesetzlicher Vorschriften sind Patienten und Anwender verpflichtet, im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretene schwerwiegende Vorfälle, die zu einer wesentlichen Verschlechterung des Gesundheitszustandes oder zum Tod geführt haben oder hätten führen können, dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde (in Deutschland BfArM) unverzüglich zu melden.


Bei Nichtbefolgung der Kontraindikationen wird jede Haftung abgelehnt.

⚠ Risiken und Nebenwirkungen
Bei empfindlicher Haut kann es unter den Kompressionsstrümpfen zu Juckreiz und Hautproblemen kommen. Daher wird eine adäquate Hautpflege empfohlen.

Bei folgenden Symptomen, die Strümpfe bitte umgehend ausziehen und die Fortführung der Therapie mit dem Arzt besprechen: Blau- oder Weißfärbung der Zehen, Missempfindungen und Taubheitsgefühle, zunehmende Schmerzen, Kurzatmigkeit und Schweißausbrüche, akute Bewegungseinschränkungen.

BELSANA

BELSANA Medizinische Erzeugnisse
Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 23 · D-96052 Bamberg · www.belsana.de
Wasserfeldstr. 20 · A-5020 Salzburg

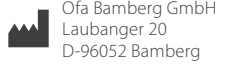

für die Apotheke: Strumpfdaten für Ihre Archivierung

Rev. 1/04/21

- Wichtige Hinweise**
- Kompressionsstrümpfe nur nach Rücksprache mit dem Arzt tragen
 - tägliches Tragen und regelmäßige Kontrolluntersuchungen sichern den Behandlungserfolg
 - Abgabe und Beratung zum richtigen Anziehen der Strümpfe muss durch medizinisch geschultes Fachpersonal erfolgen bei akuten Beinbeschwerden oder Hautreaktionen bitte umgehend den Arzt aufsuchen
 - regelmäßiges leichtes Versetzen des Haftbands kann Hautirritationen vorbeugen
 - bei Qualitätsproblemen und Beanstandungen bitte an den Fachhändler wenden
- Wirktprinzip medizinischer Kompressionsstrümpfe**
Durch auf die jeweilige Indikation abgestimmte Produkte und kontrollierten Druck werden der Blutrückfluss beschleunigt, die Mikrozirkulation im Gewebe verbessert und der Lymphfluss gesteigert.

- Pflegen**
- trocken, am besten in Originalverpackung lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen
 - Strümpfe mit silikonbeschichteten Haftbändern nicht mit Lösungsmitteln, Säuren, Cremes und rückertenden Waschtönen in Berührung bringen, da die Haftfähigkeit dauerhaft beeinträchtigt werden kann
 - unbedingt auf regelmäßige Fußpflege und einwandriges Schuhwerk achten
 - Faserknöcheln (Filling) sind ein normaler Vorgang bei Textilien und kein Reklamationsgrund
 - Schäden an Strümpfen niemals selbst reparieren, sondern zurück zu dem Fachhändler bringen, bei dem der Strumpf gekauft wurde
- Zweckbestimmung**
Kompressionsstrümpfe werden zur Therapie von plebiologischen und lymphologischen Erkrankungen der Arme und Beine sowie bei Lipödem eingesetzt. Je nach Indikation kommen unterschiedliche Produkte zum Einsatz.

- Waschen**
- für den sofortigen Gebrauch geeignet
 - Emphlung: vor dem ersten Tragen waschen
 - tägliche Wäsche (max. 40°C) von Hand oder im Schonwaschgang der Maschine
 - separat mit Feinwaschmittel (z. B. BELSANA blau40 Waschmittel), BELSANA Impuls bitte auf rechts bzw. BELSANA classic extra auf links waschen und keinen Weichspüler verwenden!
 - gut ausspülen, schonend schleudern aber nicht wringen
 - auf einem Handtuch an der Luft oder im Schongang ihres Trockners trocknen, niemals bügeln und nicht auf der Heizung oder in der Sonne trocknen
- Materialzusammensetzung**
Verwendet werden Polyamid, Elasthan und bei einigen Produkten Baumwolle oder Merinowolle. Die konkreten Angaben entnehmen Sie bitte dem in Ihrem Strumpf eingeklebten Textiletikett.

- Kompressionsstrümpfe richtig waschen**
- **BELSANA Impuls bitte auf rechts bzw. BELSANA classic extra auf links waschen und keinen Weichspüler verwenden!**
 - Schonwaschgang
 - Nicht bleichen
 - Schonend trocknen
 - Nicht bügeln
 - Nicht chemisch reinigen

Damit Ihre Nachbestellung bei der nächsten Verordnung ganz einfach und unkompliziert ist, finden Sie links **Ihren persönlichen Strumpfpass** mit allen maßgeblichen Informationen. Einfach abziehen, zusammenkleben und gut aufbewahren.

Mit besten Empfehlungen
Ihr BELSANA Team

BELSANA

Ihre Maßanfertigung ist da! **Strumpfpass** **Strumpfpass** **Strumpfpass**

Merktel für ihre Waschmaschine